

**power
SCOPE²**

**Montar em
MIH**

**Ativar em
MIH**

Sempre a ativação é
feita em MIH (Habitual)
e Não em construtiva.

www.hiplus.com.br

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**


**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**



**power
SCOPE²**

**ENTENDENDO A
ATIVAÇÃO DO APARELHO**

Neste exemplo, em
habitual (MIH) está
passivo, sem ativação.
Veja as 3 “linhas”.

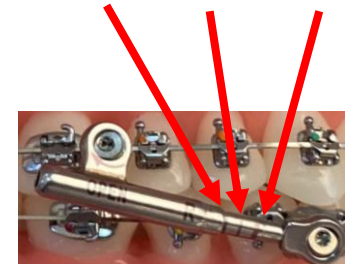

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**power
SCOPE²**

**Montar em
MIH**

**Ativar em
MIH**

Sempre a ativação é
feita em MIH (Habitual)
e Não em construtiva.

www.hiplus.com.br

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**power
SCOPE²**

**ENTENDENDO A
ATIVAÇÃO DO APARELHO**

Neste exemplo, em
habitual (MIH) foi inserido
um ativador de 3mm e
está semi-ativo, com meia
ativação.

Veja as 2 “linhas”.



hiplus

Distribuidor Oficial

**AO
AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**AO AMERICAN
ORTHODONTICS**

**power
SCOPE²**

**Montar em
MIH**

**Ativar em
MIH**

Sempre a ativação é
feita em MIH (Habitual)
e Não em construtiva.

www.hiplus.com.br

AO AMERICAN
ORTHODONTICS


AO AMERICAN
ORTHODONTICS

AO AMERICAN
ORTHODONTICS

**power
SCOPE²**

ENTENDENDO A
ATIVAÇÃO DO APARELHO

Neste exemplo, em habitual
(MIH) foi inserido ativador de
3mm e de 2mm, está
*totalmente ativo.
Não se vê as “linhas”.

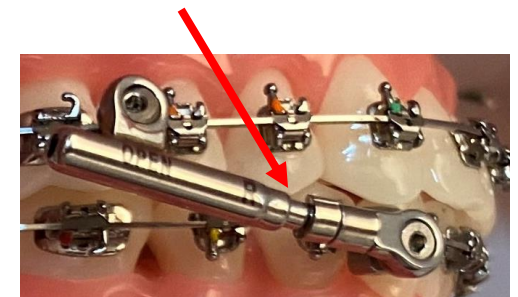

*totalmente ativo = 260grs



AO AMERICAN
ORTHODONTICS

AO AMERICAN
ORTHODONTICS

AO AMERICAN
ORTHODONTICS

Informações finais: Dicas Prof. Dr. Alexandre Moro

- O tempo da correção para uma Classe II completa oscila entre 6 a 12 meses.
- Em geral, o dispositivo corrige a relação molar em 1mm ao mês.
- O tempo de instalação do aparelho é de aprox. 5 minutos, e ativação ou reativação são 30 segundos.
- Considere colocar o arco de Aço .019 x .025 numa consulta prévia à instalação do aparelho PowerScope2. (quando utilizado o slot .022)
- Nunca reutilize aparelho.



5 anos de utilização clínica do propulsor
mandibular PowerScope™
Five year clinical evaluation of the PowerScope™
Class II corrector

Alexandre Moro¹
Camila F. P. Mattos²
Nathaly D. Moraes³
Suelen W. Borges³
Gisele M. Correr Nolasco⁴
Francielle Topolski⁴

*Fonte: artigo científico do Dr. Alexandre Moro na revista OrthoScience (Brasil)

power
SCOPE²